

# ジルコニアプレミアム 新色登場

KSW、KS1、KS2、KS3



強さと透明感を両立。

ジレストCAD(京セラメディカル)使用

さらにNew!

「加工精度、表面なめらかさが向上」

レダース、CAMソフト更新。

同時5軸加工開始!

医療従事者向け





# 新プレミアム(ジレストCAD)の特徴

これまでよりもシェードガイドに近い4色を追加

ジレストCADは高い光透過性と曲げ強度(4軸曲げ強度で1040MPa、京セラメディカル実測値)を兼ねたジルコニアで、フルジルコニアとしても、ジルコニアセラミックスのフレームとしてもお使いいただけます。

用意された4色のカラーはこれまでのジルコニアと比べ、よりピタシェードガイドに近似しています。

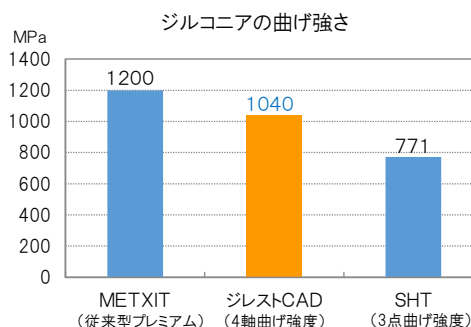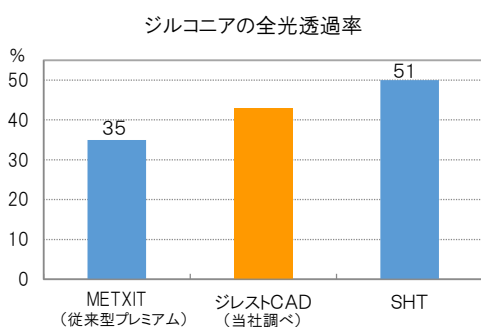


※一般的には4軸曲げ強度は3軸曲げ強度に比べて(ワイル係数を10~25と仮定した場合)15~25%低い値となります。

## レダース同時5軸加工の利点

より複雑な形状の再現が可能に

レダースRXP500DSCのミリングソフトを更新。完全同時5軸加工が可能になりました。これにより、これまでよりも複雑な形状の加工が可能です。  
ジルコニアクラウンへの影響としてはクラウン内面の支台歯への適合性の向上や、フルジルコニアクラウンの際に重要となるクラウン表面のなめらかさが向上するなど、品質向上に大きな効果があります。

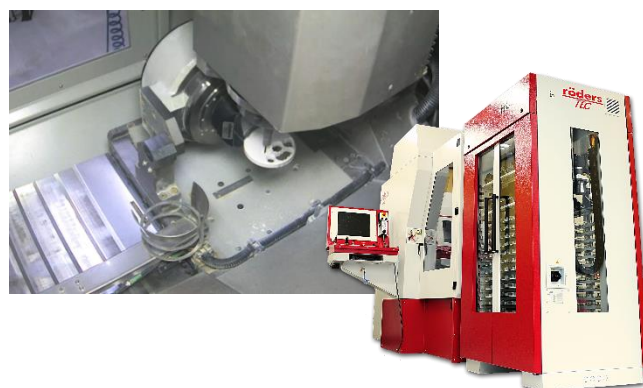

**SD** 株式会社スワデンタル  
http://www.suwadentaru.co.jp

相模原営業所

〒252-0231  
神奈川県相模原市中央区  
相模原5-5-7  
TEL 042-753-5121  
Fax 042-753-5184

東京営業所

〒110-0015  
東京都台東区東上野  
3-2-6  
TEL 03-5812-4508  
Fax 03-5812-4509

諏訪営業所

〒392-0013  
長野県諏訪市沖田町  
4-16-3  
ニュースビル2F西号室  
TEL 0266-75-5453  
Fax 0266-75-5877

横浜営業所

〒289-1313  
神奈川県横浜市神奈川区  
青木町7-9  
雙林ビル101  
TEL 045-624-9244  
Fax 045-624-9244

向ヶ丘遊園営業所

〒214-0014  
神奈川県川崎市多摩区  
登戸1688  
太田ビル2F  
TEL 044-272-8748  
Fax 044-272-8748

※ZIRESTは京セラメディカル(株)の登録商標です。